

SENTiFIT® pierceTube

Für den quantitativen Nachweis von
Menschlichem Hämoglobin in Stuhlproben

labors.at


So einfach geht's

Das SENTiFIT® pierceTube ist vollkommen unkompliziert und hygienisch in der Anwendung. Die folgende Anleitung zeigt die richtige Entnahme der Stuhlprobe in 6 Schritten.

Ein kurzes Video zur Stuhlentnahme finden Sie unter [Darmkrebsscreening](#).



Schritt 1

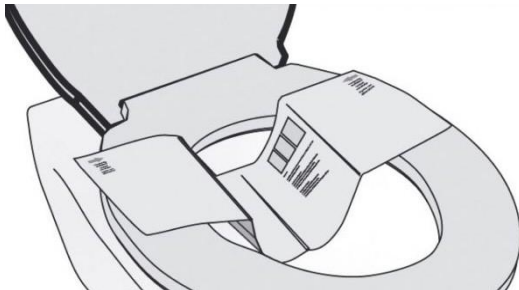


Befestigen Sie den Stuhlfänger an der Toiletten Brille. Die Darmentleerung sollte über dem Papier des Stuhlfängers erfolgen. Vermeiden Sie Wasser- oder Urinkontakt.

Schritt 2



Schrauben Sie die grüne Kappe mit dem Entnahmestäbchen ab. Halten Sie das Röhrchen nicht kopfüber.

Schritt 3

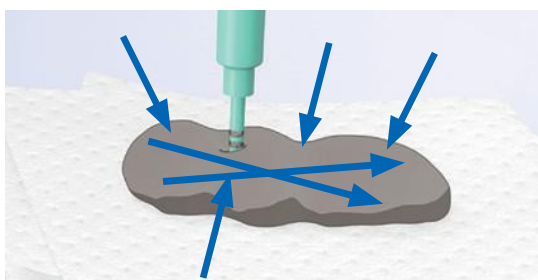

Stechen Sie mit dem Entnahmestäbchen an vier Stellen nicht zu tief in den Stuhl. Streichen Sie anschließend kreuzweise über die Oberfläche.

SENTiFIT®pierceTube– So einfach geht's

Schritt 4



Achten Sie darauf, dass alle Einkerbungen mit Stuhl gefüllt sind. Nehmen Sie nicht übermäßig viel Stuhl.

Schritt 5



Schrauben Sie die grüne Kappe wieder fest auf das Röhrchen.

Schritt 6



Schwenken Sie das Röhrchen mehrmals über Kopf. Jetzt darf es nicht mehr geöffnet werden. Bringen Sie das Röhrchen spätestens am Tag nach der Entnahme zu Ihrem Arzt zurück.

Allgemeine Hinweise

- Den Behälter für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Die im Behälter enthaltene Flüssigkeit darf nicht verschluckt werden und nicht in Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten gelangen.
- Der Behälter ist so konstruiert, dass ein Austreten der Flüssigkeit verhindert wird.
- Bei versehentlichem Kontakt bitte sofort einen Arzt aufsuchen.
- Die Stuhlprobe unmittelbar nachdem Ausscheiden nehmen.
- Den Behälter oder Teile dessen keinesfalls in den After einführen.
- Stuhlproben dürfen nicht während der Menstruation genommen werden und wenn Blutungen am After auftreten (z.B. bei Hämorrhoiden oder aus anderen Gründen) oder wenn der Stuhl durch Urin kontaminiert ist.
- Den Behälter nur einmal benutzen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Die transparente Kappe nicht öffnen oder versuchen zu öffnen.



Sentinel CH. SpA
Via Robert Koch 2, 20152 Mailand, Italien



REF1156188

Vertrieb Deutschland: Sysmex Deutschland GmbH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Deutschland · Telefon +49 40 534102-0 · Fax +49 40 5232302 · info@sysmex.de · www.sysmex.de

Vertrieb: Sysmex Europe GmbH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Deutschland · Telefon +49 40 52726-0 · Fax +49 40 52726-100 · drd@sysmex-europe.com · www.sysmex-europe.com

Hersteller: Sentinel CH. SpA
Via Robert Koch 2, 20152 Mailand, Italien