

SENTiFIT® iFOB test

Za mjerenje količine krvi u stolici

Tako je jednostavno

SENTiFIT® iFOB test je jednostavan i higijenski u upotrebi. Sljedeće upute pokazuju pravilno uzimanje uzorka stolice u šest koraka.

Napomena: Ako ste od svog liječnika dobili pomagalo za prikupljanje stolice, molimo vas da pratite upute koje su na njemu nacrtane.

Opće napomene

- Čuvati izvan dohvata djece.
- Tekućina u posudi ne smije se progutati niti doći u kontakt s očima ili sluznicom. Posuda je napravljena tako da sprječava istjecanje tekućine. U slučaju kontakta odmah se obratite liječniku.
- Uzorak stolice uzmite odmah nakon obavljanja nužde.
- Posuda je namijenjena isključivo za vanjsku upotrebu. Ne gurajte posudu niti njezine dijelove u tijelo.
- Uzorak stolice ne smije se uzimati tijekom menstruacije, ako imate krvarenje iz debelog crijeva (npr. zbog hemoroida) ili ako se stolica pomiješa s mokraćom.
- Upotrijebite posudu samo jednom i nemojte je izlagati suncu.
- Ne otvarajte niti pokušavajte otvoriti prozirni čep.






- 1.** Idite u toalet. Stavite malo toaletnog papira u WC školjku. Obavite nuždu na toaletni papir. Izbjegavajte kontakt s vodom ili mokraćom.



- 2.** Odvrnite zeleni čep s štapićem za uzimanje uzorka. Ne držite epruvetu okrenutu naopako.

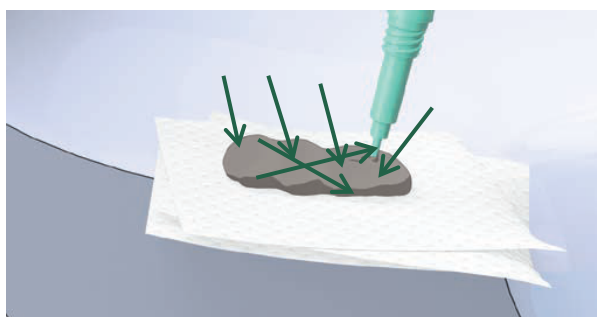

- 3.** Štapić lagano zabodite na četiri različita mjesta u stolici. Nakon toga njime prođite preko površine u obliku križa.



- 4.** Pazite da su svi utori ispunjeni stolicom. Nemojte uzeti previše stolice.



- 5.** Čvrsto zavrните zeleni čep natrag na epruvetu.



- 6.** Nekoliko puta okrenite epruvetu naopako. Nakon toga više se ne smije otvarati. Vratite epruvetu svom ljekaru najkasnije sljedeći dan nakon uzimanja uzorka.