

Тест SENTiFIT® iFOB

Для кількісного визначення людського гемоглобіну у зразках калу

Це дуже просто

Тест SENTiFIT® iFOB простий і гігієнічний у використанні. Наступна інструкція показує правильний забір зразка калу у шість кроків.

Примітка: Якщо ви отримали від лікаря допоміжний засіб для збору калу, дотримуйтеся інструкцій на ньому.

Загальні вказівки

- Зберігайте контейнер у недоступному для дітей місці.
- Рідину в контейнері не можна ковтати або допускати її потрапляння в очі чи на слизові оболонки. У разі випадкового контакту негайно зверніться до лікаря. Візьміть зразок калу одразу після випорожнення.
- У жодному разі не вводьте контейнер або його частини в анальний отвір.
- Не беріть зразок калу під час менструації, при кровотечі з анального отвору (наприклад, через геморой або з інших причин) або якщо кал забруднений сечею.
- Використовуйте контейнер лише один раз і уникайте прямого сонячного проміння.
- Не відкривайте і не намагайтеся відкрити прозору кришку.






- 1.** Підійдіть до туалету. Покладіть трохи туалетного паперу в унітаз. Випорожнення слід здійснити на туалетний папір. Уникайте контакту з водою або сечею.



- 2.** Відкрутіть зелену кришку разом із паличкою для забору зразка. Не тримайте пробірку догори дном.

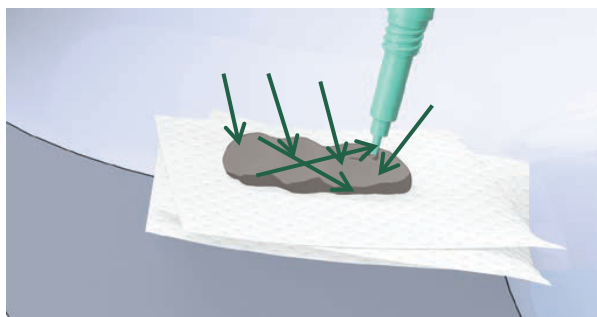

- 3.** Введіть паличку для забору зразка у кал у чотирьох місцях, не надто глибоко. Потім проведіть нею хрест-навхрест по поверхні.



- 4.** Переконайтеся, що всі заглиблення заповнені калом. Не беріть занадто багато калу.



- 5.** Щільно закрутіть зелену кришку назад на пробірку.



- 6.** Кілька разів переверніть пробірку догори дном. Після цього її більше не можна відкривати. Поверніть пробірку лікарю не пізніше наступного дня після взяття зразка.